


ขั้นตอนการใช้งาน

เครื่องวิเคราะห์สมบัติการเปลี่ยนแปลงเชิงพลังงานด้วยความร้อน

Differential Scanning Calorimeter (DSC)

วิธีการเปิดเครื่อง DSC และตั้งค่าการทดสอบ

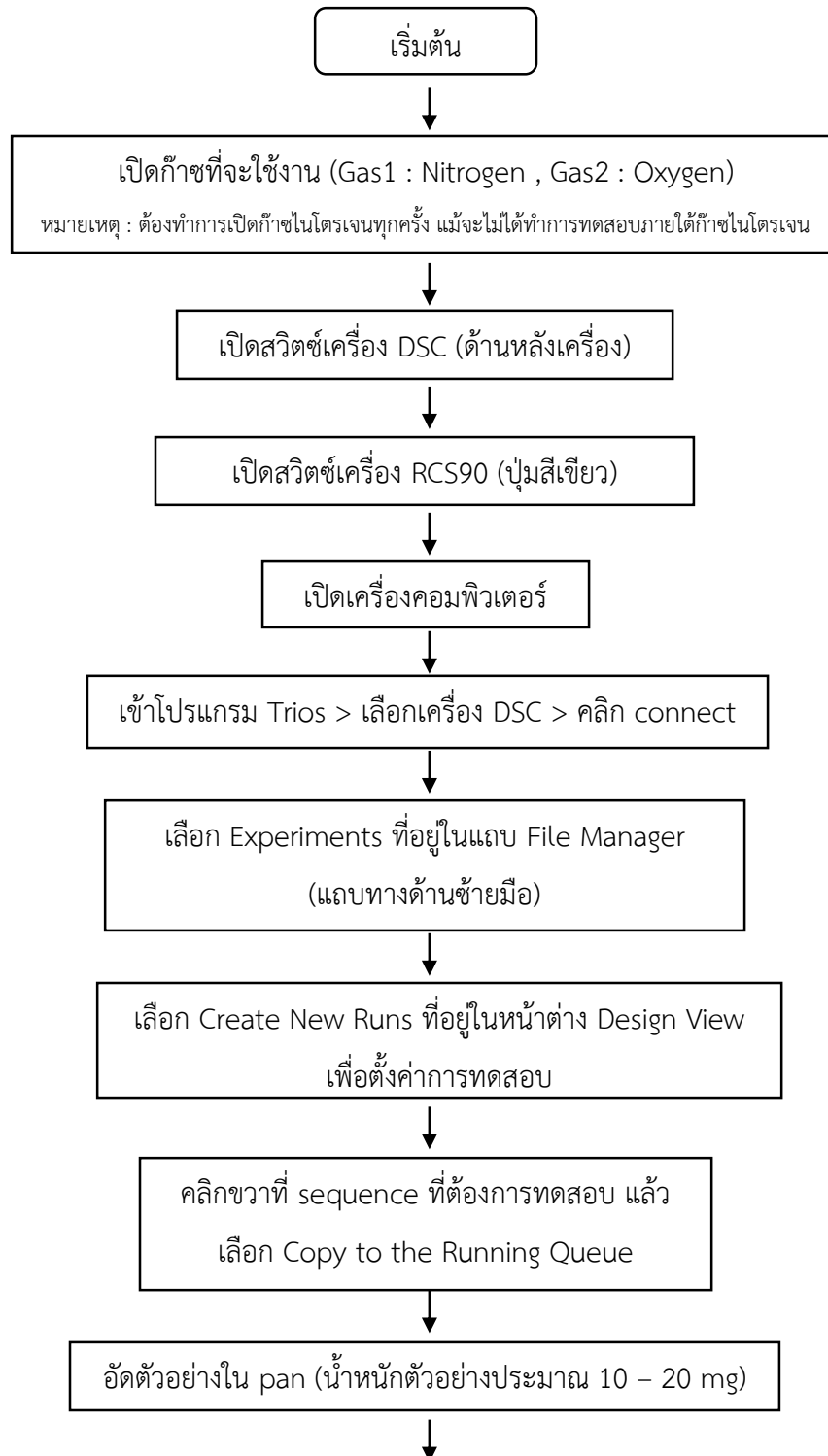

วาง reference pan ที่ sensor ที่อยู่ใกล้ตัว
และวาง sample pan ที่ sensor ที่อยู่ใกล้ตัว



คลิก Start แล้วรอนจนกว่าจะเสร็จการทดลอง

วิธีการปิดเครื่อง DSC

ปิดสวิตช์เครื่อง RCS90 แล้วรอนจนกว่าอุณหภูมิ Flange Temperature
มีค่าใกล้เคียงอุณหภูมิห้อง



Shut down แล้วปิดสวิตช์เครื่อง DSC



Shut down เครื่อง computer



ปิดก๊าซที่ใช้งาน

